



NAVODILA ZA UPORABO

Mini masažni aparat Beurer MG 16

Kataloška št.: 86 04 50



beurer

Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Varnostni napotki	3
3. Upravljanje	3
4. Čiščenje in vzdrževanje naprave	4
5. Odstranjevanje	4
6. Izključitev odgovornosti	4
Garancijski list	6

1. Predvidena uporaba

Naprava je predvidena samo za uporabo, ki je opisana v teh navodilih za uporabo. Proizvajalec ne more jamčiti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali lahkomišelné uporabe.

Ta naprava je namenjena masaži posameznih delov človeškega telesa. Masažnega aparata ne uporabljajte, če za vas velja eno ali več opozoril, ki so navedena v nadaljevanju.

OPOZORILO

Masažnega aparata **ne** uporabljajte v naslednjih primerih:

- na otrocih,
- pri bolezenski spremembi ali poškodbi predela telesa, ki ga želite masirati (npr. opekline, odprte rane, brazgotine, kožni izpuščaji ali druge poškodbe),
- pri obolenjih obtočil in glavobolih,
- na glavi, kosteh (npr. sklepi, hrbtenica) ali drugih občutljivih delih telesa,
- po operacijah,
- med nosečnostjo,
- po zaužitju zdravil ali alkohola (omejena sposobnost zaznavanja!),
- pri upravljanju strojev,
- primerno za zunanjo uporabo.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se z napravo ne bodo igrali.

Uporaba naprave ne nadomesti posvetovanja z zdravnikom in zdravniškega zdravljenja.

Pred uporabo masažnega aparata se posvetujte s svojim zdravnikom v naslednjih primerih:

- če nosite srčni spodbujevalnik, implantate ali druge pripomočke,
- pri bolečinah z nepojasnenim vzrokom,
- če niste prepričani, da je naprava primerna za vas.

Opomba

Masaža mora biti vedno prijetna in sproščujoča. Če masaža postane boleča ali neprijetna, potem prekinite z masiranjem ali pa spremenite svoj položaj ali jakost pritiskanja.

2. Varnostni napotki


OPOZORILO

- Pred uporabo se prepričajte, da naprava in njena oprema nimata vidnih poškodb. V primeru dvomov naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali na naveden naslov servisne službe.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec oz. je ne ponuja kot dodatno opremo.
- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati ali popravljati, sicer ni možno zagotoviti pravilnega delovanja. V nasprotnem primeru izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Če naprava potrebuje popravilo, se obrnite na servisno službo Beurer ali na pooblaščenega trgovca.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

3. Upravljanje

Vstavljanje oz. menjava baterij:

- Pokrov baterijskega predala zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- V baterijski predal vstavite tri alkalne ali tri običajne baterije tipa AAA in pri tem upoštevajte oznako. Pri tem obvezno pazite na pravilno polarnost baterij!
- Pokrov baterijskega predala namestite na baterijski predal. Pri tem obvezno pazite na pravilno usmeritev pokrova!

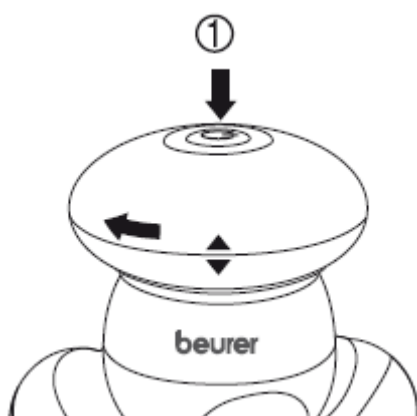

Pritisk tipke:

- ① 1 x vklop
- ① 2 x izklop

Napotki za ravnanje z baterijami

Pazite, da baterije ne zaidejo v otroške roke. Otroci lahko baterije vtaknejo v usta in jih pogoltnejo. Ta lahko vodi do resnih telesnih poškodb. V tem primeru nemudoma poiščite zdravniško pomoč!

- Običajnih baterij ne smete polniti, segrevati ali jih metati v odprt ogenj (nevarnost eksplozije!).
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati in uporabljajte baterije istega tipa.
- Iztečene baterije lahko povzročijo poškodbe na napravi. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, potem baterije vzemite iz baterijskega predala.
- Ne uporabljajte polnilnih baterij!

4. Čiščenje in vzdrževanje naprave

Vaš masažni aparat ne potrebuje vzdrževanja. Samo zunanost ohišja je treba redno čistiti. Pred čiščenjem odstranite baterije iz baterijskega predala.

Svoj mini masažni aparat previdno čistite samo z rahlo navlaženo krpo.


- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.
- Naprave v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo, sicer lahko pride do vdora tekočine, ki lahko poškoduje napravo.

5. Odstranjevanje



Prosimo, da napravo odstranite v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2002/96/ES (OEEO). Če imate vprašanja, se prosimo obrnite na komunalno podjetje, ki je pristojno za odstranjevanje odpadkov.

Odslužene, popolna izpraznjene baterije je treba oddati v posebne označene zbirne posode, na zbirališčih za posebne odpadke ali pri trgovcu z električno opremo. Zakonsko ste zavezani k pravilnemu odstranjevanju baterij.

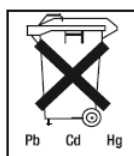

Opomba: Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, najdete naslednje znake: Pb (= baterija vsebuje svinec), Cd (= baterija vsebuje kadmij), Hg (= baterija vsebuje živo srebro).

6. Izključitev odgovornosti

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- v primeru škode, ki je nastala zaradi nepravilnega upravljanja,
- za obrabljive dele,
- za pomanjkljivosti, ki so bile stranki znane že ob nakupu,
- zaradi lastne krivde stranke.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Nemčija
Telefon: +49 (0)731 / 39 89-144 • Faks: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • E-pošta: kd@beurer.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Mini masažni aparat Beurer MG 16**
Kat. št.: **86 04 50**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.